

Horry County Fire Rescue
Office of the
Assistant Chiefs



Battalion One: Douglas Cline
Office Phone: 843.365.2384
Battalion Two: Justin L. Gibbins
Office Phone: 843.903.4094
Battalion Three: P. Scott Thompson
Office Phone: 843.365.1885

Operational Directive 2011-01

To: All Personnel

Date: October 19, 2011

Re: Lancets


All personnel need to immediately check their apparatus and station inventory for the old style lancets. The old lancets are non-compliant with safety regulations and need to be discarded immediately. The compliant lancet carried by the Department is a SurgiLance Safety Lancet(see attached.) All other lancets should be discarded immediately.

Horry County Fire Rescue
Office of the
Assistant Chiefs



Battalion One: Douglas Cline
Office Phone: 843.365.2384
Battalion Two: Justin L. Gibbins
Office Phone: 843.903.4094
Battalion Three: P. Scott Thompson
Office Phone: 843.365.1885

USER GUIDE / GUÍA DEL USUARIO / MODE D'UTILISATION

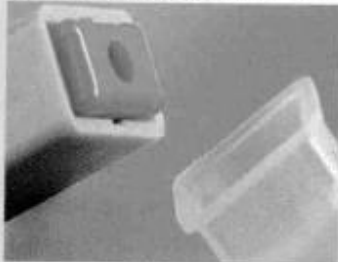

Simply clean test site with isopropyl alcohol and wipe dry. Remove protective cap from the safety lancet.

Limpie la piel con alcohol y séquela. Quite la tapa protectora de la lanceta de seguridad.

Nettoyer tout simplement la zone de prélèvement puis enlever le capuchon protecteur de la lancette sécurisée **Surgilance**.



Place red raised platform end of safety lancet on the test site.

Ponga la plataforma roja de la lanceta de seguridad en la piel.

Positionner la surface rétractable rouge de la lancette sécurisée **Surgilance** sur le bord extérieur du doigt.



Gently push the safety lancet down against test site to activate.

Presione suavemente la lanceta contra la piel y apriete para activar el mecanismo de la lanceta.

Appuyer doucement sur la lancette sécurisée **Surgilance** pour déclencher le mécanisme de prélèvement.



Once used, simply discard lancet into a refuse container.

Una vez usada, sólo tire la lanceta en el recipiente de basura.

Le prélèvement sanguin effectué, jeter la lancette dans un conteneur à aiguilles usagées.

Do not use lancets if damaged. / No use las lancetas si están defectuosas. / Ne pas utiliser si les lancettes sont endommagées.

